

人TNFRSF9/CD137双抗夹心ELISA检测试剂盒

请在实验前仔细阅读本说明书

产品货号: KE00369
规格: 96T
灵敏度: 0.2 pg/mL
检测范围: 7.8-500 pg/mL
用途: 此试剂盒用于定量检测血清、血浆以及细胞上清中的人TNFRSF9/CD137浓度

本产品仅用于科学研究，不适用于临床诊断


目录

一：背景信息	3
二：检测原理	3
三：需自备的实验器材	3
四：试剂盒组分及储存	4
五：实验注意事项	4
六：样本准备	4
七：试剂准备	5
八：实验步骤	6
九：实验参数	7
9.1 参考标曲图	7
9.2 精密度	7
9.3 加标回收率	8
9.4 样本值	8
9.5 灵敏度	8
9.6 线性	9
9.7 特异性	9
十：参考文献	9

一：背景信息

CD137，也称为TNFRSF9或4-1BB，是一种诱导型T细胞表面受体，属于肿瘤坏死因子受体超家族。CD137 是一种在活化 T 细胞表面表达的跨膜蛋白。此外，还在 B 淋巴细胞、单核细胞和多种非淋巴细胞类型中发现了 CD137 的活化依赖性表达。CD137 提供了一种共刺激信号，可增强细胞的存活和分化，并且在 CD8 细胞毒性 T 细胞的发育和抗肿瘤免疫中具有关键作用。CD137 (sCD137) 的可溶性形式是通过差异剪接产生的，并由活化的淋巴细胞释放。血清 sCD137 水平升高与一些疾病有关，包括类风湿性关节炎、多发性硬化症、慢性淋巴细胞白血病和急性冠状动脉综合征。

二：检测原理

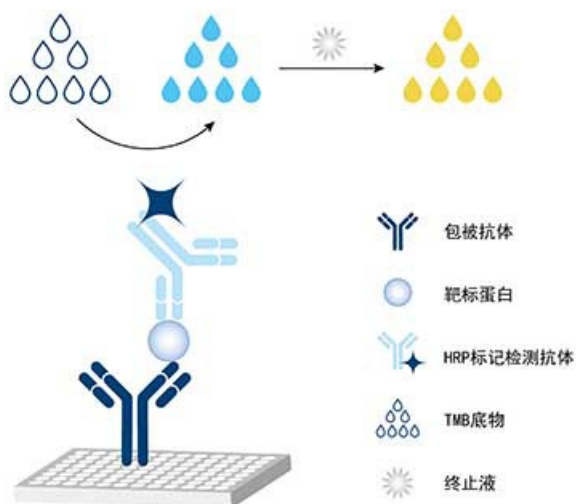

◀双抗夹心模式图 (检测抗体直标HRP)

按操作顺序形成抗体夹心结构后，加入TMB底物，板孔液体由无色变成蓝色，再加入终止液液体变为黄色后进行吸光度值测定。

三：需自备的实验器材

- 3.1 酶标仪 (可读取450 nm和630 nm双波长);
- 3.2 高精度移液器及一次性移液器枪头;
- 3.3 洗板机 (亦可手动洗板);
- 3.4 EP管 (用于稀释标准品及样本);
- 3.5 吸水毛巾或滤纸 (用于拍干);
- 3.6 烧杯和量筒;
- 3.7 用于ELISA实验的数据分析的统计拟合软件 (推荐四参数拟合方法), 如: Origin, ELISA Calc等。

四：试剂盒组分及储存

英文名称	中文名称	规格	数量
Microplate	预包被酶标板 - 96 孔板	8孔 × 12条	1 块
Protein standard	标准品 - 冻干粉状 *	1000 pg/瓶	2 瓶
Detection antibody, HRP-conjugated (100×)	HRP标记检测抗体浓缩液 (100×) **	120 µL/支	1 支
Sample Diluent PT 1	样本稀释液 PT 1 (用于人血清和血浆样本)	30 mL/瓶	1 瓶
Sample Diluent PT 3-ec	样本稀释液 PT 3-ec (用于细胞上清样本)	30 mL/瓶	1 瓶
Detection Diluent	抗体稀释液	30 mL/瓶	1 瓶
Wash Buffer Concentrate (20×)	浓缩洗涤液 (20×)	30 mL/瓶	1 瓶
Tetramethylbenzidine Substrate (TMB)	显色底物 TMB	12 mL/瓶	1 瓶
Stop Solution	终止液	12 mL/瓶	1 瓶
Plate Cover Seals	封板膜		4 张
储存条件： 1：未开启试剂盒可在2-8℃条件下存放6个月或者在-20℃条件下存放1年 2：已开启试剂盒可在2-8℃存放7天 3：每次实验均使用新的标准品,使用后丢弃			

* 使用对应的样本稀释液对标准品进行复溶，复溶过程避免产生气泡

** 开盖前请离心

五：实验注意事项

5.1 避免皮肤接触终止液以及TMB 显色液；

5.2 在实验过程中，注意穿戴个人防护装备，如实验服，手套，口罩和护目镜；

5.3 请勿将不同批次的试剂进行混用，过期产品请勿使用；

5.4 在使用自动洗板机时，板孔加入洗涤液之后，设置30秒的浸泡程序，以提高分析的精确度。

六：样本准备

6.1 血清：全血标本室温凝固 30 min后1000×g 离心15 min，取上清立即使用或分装后-20℃存放，避免反复冻融。

6.2 血浆：可用EDTA、肝素或柠檬酸盐作为抗凝剂，标本采集后1000×g 离心15 min，立即使用或分装后-20℃存放，避免反复冻融
(注意：标本溶血会影响检测结果，因此溶血标本不宜进行检测)。

6.3 细胞上清：收集细胞培养液，500×g 离心5 min取上清，立即使用或分装后-20℃存放，避免反复冻融。

七：试剂准备

7.1 洗涤液（1×）：

如果洗涤液（20×）有晶体析出，37℃加热至晶体全部溶解。按1:20稀释倍数进行稀释：如取30 mL 浓缩洗涤液（20×），加入570 mL 超纯水或去离子水，得到洗涤液（1×）。

7.2 HRP标记检测抗体（1×）：

开盖前瞬时离心，按1:100比例进行稀释，稀释前根据预先计算实验所需的总量配制（100 μL/孔），实际配制时应多配制0.1-0.2 mL。如10 μL HRP标记检测抗体浓缩液（100×）加 990μL 抗体稀释液进行配制，轻轻混匀。


7.3 待检测样本：

不同的样本使用相应的样本稀释液进行稀释，如果样本检测值超过标曲最高范围，可将样本进行一定的稀释后再进行实验，使样本的检测值处于标曲范围内，不同样本的稀释倍数需自行优化。

稀释比推荐如下：人血清和血浆样本1:2或1:4稀释；细胞上清样本1:4或1:8稀释；样品采集、处理和储存的差异可能导致测值的改变。

7.4 梯度稀释的标准品：

检测人血清和血浆样本，用2 mL PT 1样本稀释液复溶标准品；检测细胞上清样本，用2 mL PT 3-ec样本稀释液复溶标准品。具体操作如下：

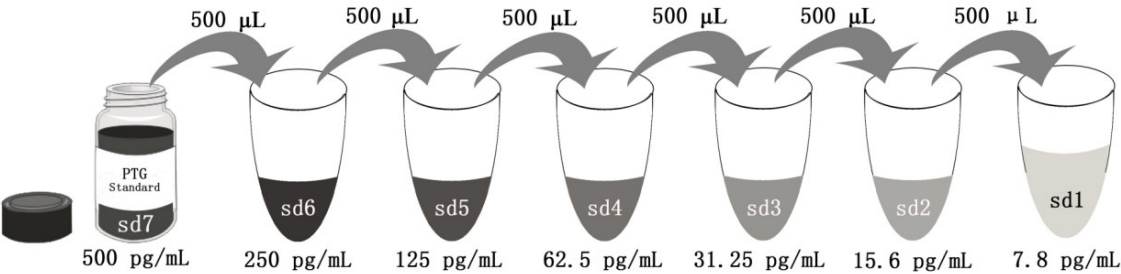

Add # μL of Standard diluted in the previous step	—	500 μL	500 μL	500 μL	500 μL	500 μL	500 μL
# μL of Sample Diluent PT 1 or PT 3-ec	2000 μL	500 μL	500 μL	500 μL	500 μL	500 μL	500 μL
	"sd7"	"sd6"	"sd5"	"sd4"	"sd3"	"sd2"	"sd1"

八：实验步骤

实验前，需要将所需试剂在室温平衡20-30min（HRP标记检测抗体浓缩液不需要平衡室温，即用即取）；在进行标准品、样本以及不同试剂加样时，更换枪头，避免接触微孔板的内表面，不同的试剂，使用不同的加样槽。

8.1 根据实验用量，取出需要用到的酶标板条，剩余板条加入干燥剂放入铝箔袋密封后存放于4°C，并于一周之内用完；

8.2 加样，分别设零孔、标准孔、待测样本孔。零孔加样本稀释液100 μ L，余孔分别加梯度稀释的标准品或待测样本100 μ L/孔，注意不要产生气泡（建议标准品和样本都做复孔，尽量避免实验误差，确保上样不间断，5-10 min完成加样）；

8.3 酶标板盖上覆膜，37°C孵育2 h；

8.4 洗涤

1) 揭开封板膜（动作轻柔，避免动作过大导致液体溢出串孔），弃液体，拍干；

2) 洗涤液（1 $\times$ ）洗涤板条，每孔350-400 μ L，洗涤后，甩掉液体拍干板条，重复此步骤4次，避免异物进入板孔以及板条干燥；

8.5 每孔加100 μ L HRP标记检测抗体（1 $\times$ ）（参照试剂准备部分7.2），盖上封板膜，37°C孵育40 min；

8.6 重复步骤8.4；

8.7 显色：每孔加TMB显色液100 μ L，37°C避光显色 15-20 min（如果颜色偏浅，可适当延长显色时间，不超过30 min；保持显色底物始终处于避光状态，显色底物在加样前应是无色透明，如有变色，请勿使用）；

8.8 终止：每孔加终止液100 μ L，蓝色变黄色。终止液与TMB显色液的加样顺序一致；（注意：眼睛和皮肤避免接触终止液）

8.9 读数：以630 nm为校正波长，用酶标仪在450 nm波长测量各孔的光密度（OD值）。加入终止液后5 min内进行读数，若无630 nm波长，也可直接使用450 nm波长读数；


8.10 数据分析：每个标准品和样本的OD值需减去零孔的OD值，设置复孔，取其平均值。以标准品的浓度为横坐标，OD值为纵坐标，使用专业软件（如Origin、ELISACalc等）进行四参数拟合（4-PL），根据样本的OD值由标准曲线推算出拟合浓度，乘以稀释倍数得到样本的实测浓度。

操作流程如下：


步骤	试剂	体积	孵育时间	洗涤次数	孵育温度
1	标准品或样本	100 μ L	120 分钟	4 次	覆膜后37°C孵育
2	HRP标记检测抗体（1 $\times$ ）	100 μ L	40 分钟	4 次	覆膜后37°C孵育
3	显色 TMB	100 μ L	15-20 分钟	不需要洗涤	覆膜后37°C孵育，避光
4	终止液	100 μ L	0 分钟	不需要洗涤	-
5	加入终止液后以630 nm为校正波长，在450 nm处测量OD值，此过程建议不超过5分钟				

九：实验参数

9.1 参考标曲图

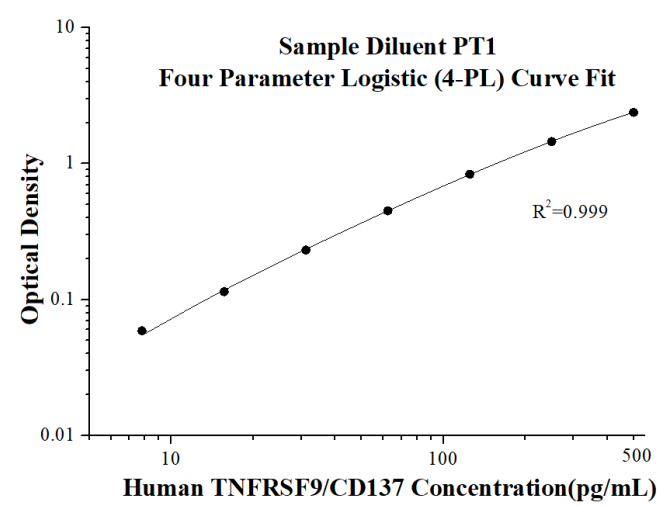

(pg/mL)	O.D	Average	Corrected
0	0.1141 0.1092	0.11165	-
31.25	0.1478 0.1473	0.14755	0.0359
62.5	0.1948 0.1988	0.1968	0.08515
125	0.2761 0.2796	0.27785	0.1662
250	0.4463 0.4385	0.4424	0.33075
500	0.7663 0.7807	0.7735	0.66185
1000	1.5065 1.4628	1.48465	1.373
2000	2.6767 2.6851	2.6809	2.56925

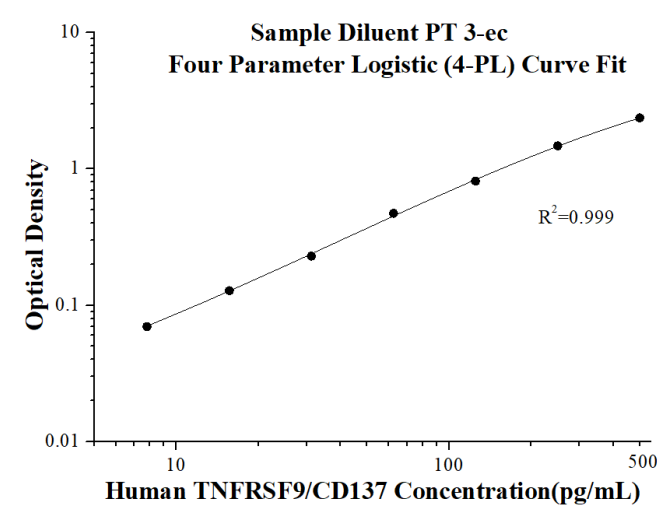

(pg/mL)	O.D	Average	Corrected
0	0.1089 0.1111	0.11	-
31.25	0.1716 0.1715	0.17155	0.06155
62.5	0.2437 0.2472	0.24545	0.13545
125	0.3514 0.3532	0.3523	0.2423
250	0.5961 0.5867	0.5914	0.4814
500	1.0444 1.0091	1.02675	0.91675
1000	1.8056 1.7292	1.7674	1.6574
2000	2.8323 2.7494	2.79085	2.68085

9.2 精密度

板内精密度：3个不同浓度的样本在板内重复测定 20次；

板间精密度：3个不同浓度的样本在板间重复测定 24次。

板内精密度 (CV内)				
样本	数量	平均值 (pg/mL)	标准差	变异系数CV%
1	20	225.5	4.0	1.8
2	20	54.9	0.9	1.6
3	20	12.6	0.4	3.3

板间精密度 (CV 间)				
样本	数量	平均值 (pg/mL)	标准差	变异系数CV%
1	24	220.0	4.7	2.1
2	24	53.8	1.3	2.4
3	24	13.5	0.6	4.2

9.3 加标回收率

样本稀释后，在标曲范围内选择高、中、低3个浓度，进行人TNFRSF9/CD137的加标回收率实验，结果如下：

样本类型	稀释倍数	平均值 (%)	范围 (%)
人血清	1:4	94	90-99
	1:8	93	90-97
细胞上清	1:16	103	98-107

9.4 样本值

人血清 - 应用本试剂盒，检测人血清样本中人TNFRSF9/CD137的浓度。

样本类型	均值 (pg/mL)	范围 (pg/mL)
人血清样本 (n=15)	108.7	27.4-564.4

细胞上清 - 在含有 10% 胎牛血清、5 μ M β -巯基乙醇、2 mM L-谷氨酰胺、100 U/mL 青霉素和 100 μ g/mL 硫酸链霉素的 RPMI 培养基中培养人外周血单个核细胞PBMC (1×10^6 个cells/mL)。加入10 μ g/mL植物血凝素PHA 刺激培养细胞3天，收集细胞上清，检测人TNFRSF9/CD137的浓度。

刺激条件	3天 (pg/mL)
未刺激	4.5
刺激	1442.8

9.5 灵敏度

用20个重复的零孔平均OD值加上两倍标准差得到的OD值带入标准曲线拟合出对应的浓度值，此试剂盒中人TNFRSF9/CD137的灵敏度为0.2 pg/mL。

9.6 线性

用对应样本稀释液稀释样本，使稀释后的检测值处于标曲范围内，线性数据如下：

(细胞上清样本预先稀释2倍。)

		人血清 (样本稀释液 PT 1)	细胞上清 (样本稀释液 PT 3-ec)
1:2	均值 (%)	100	100
	范围 (%)	-	-
1:4	均值 (%)	112	98
	范围 (%)	107-118	96-101
1:8	均值 (%)	102	97
	范围 (%)	93-111	96-99
1:16	均值 (%)	107	100
	范围 (%)	90-124	98-101

9.7 特异性

本试剂盒特异性识别天然和重组人TNFRSF9/CD137，加入50 ng/mL以下细胞因子，无明显交叉反应。

Human:

4-1BB

TNF RI

TNF RII

Mouse:

TNF RI

TNF RII

十：参考文献

1. Vinay DS. et al. (1998) Semin Immunol. 10(6):481-9.
2. Schwarz H. et al. (1995) Blood. 85(4):1043-52.
3. Nakaima Y. et al. (2013) PLoS One. 8(5):e64425.
4. Michel J. et al. (1998) Eur J Immunol. 28(1):290-5.
5. Sharief MK. et al. (2002) Eur J Neurol. 9(1):49-54.
6. Furtner M. et al. (2005) Leukemia. 19(5):883-5.
7. Yan J. et al. (2013) Clinics (Sao Paulo). 68(2):193-8.