

For Research Use Only

Phantom Dye 633/642 死活细胞鉴定染料

Catalog Number: PD00009



产品介绍

Phantom Dye 633/642 Viability Dye是一种可固定的死活细胞鉴定染料，与死细胞和活细胞中的蛋白质胺基发生反应。由于死细胞的细胞膜受损，染料可以与细胞内更多的蛋白质结合，从而产生更高的荧光，易于区分活/死细胞。

产品成分

激光器: 637 nm
发射波长: 642 nm
有效期: 自收到之日起6个月
无水DMSO中的溶液: DMSO中1 uL/test

包装规格

100 T


保存条件

-20°C，避光防潮。

使用方法

Phantom Dye 633/642 Viability Dye可以1 uL/mL的量用于细胞悬液。研究者可通过经验确定最适浓度。
[Phantom Dyes Viability Staining Protocol](#)

Validation Data

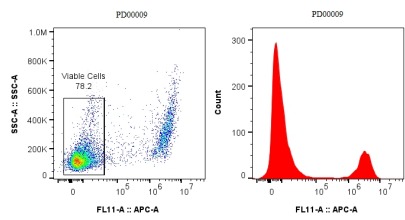

将小鼠脾细胞在65℃下10分钟热灭活，然后与活的小鼠脾细胞混合。用Phantom Dye 633/642 Viability Dye对细胞进行染色。显示的设门圈出活细胞。